


DE PRODUCTEN VAN ATTENDS ZIJN GETEST EN GOEDGEKEURD ALS HUIDVRIENDELIJK DOOR SGS PRODERM GMBH, HAMBURG, DUITSLAND

Mensen die incontinentieproducten nodig hebben, gebruiken die vaak 24 uur per dag. Dat betekent dat de huid voortdurend in contact is met de bovenlaag van het product. Juist daarom is het zo belangrijk om te kiezen voor huidvriendelijke materialen. Maar nog belangrijker, wanneer het product de huid vochtig laat, kan dit resulteren in een geïrriteerde of zelfs beschadigde huid. Dit veroorzaakt niet alleen een groot ongemak voor de gebruiker, maar kan ook leiden tot hogere zorgkosten voor de zorgverlener.


SGS proderm heeft de huidverdraagzaamheid en de effecten op de huidgezondheid van Attends incontinentieproducten op de volgende drie manieren getest:

1. Test met droog materiaal

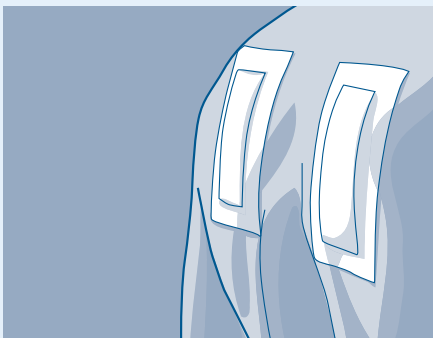

Aanbrengen van kleine delen (van het droge product of materialen die in contact komen met de huid) op de rug van de proefpersoon. Gedurende 3 x 24 uur een dagelijkse visuele dermatologische evaluatie van eventuele huidreacties. Beoordeling door SGS proderm met behulp van een schaalverdeling waarin de reactie van de huid wordt vastgelegd.

2. Test met nat materiaal

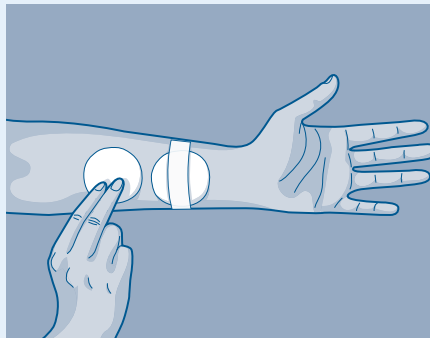

Aanbrengen van een deel van een Attends product, bevochtigd met synthetische urine, gedurende 3 x 24 uur. De effecten op de huid worden visueel geëvalueerd en door SGS proderm samen met de TEVV* meting beoordeeld. Let op: de vochtigheid van de producten weerspiegelt de vochtterugslag** resultaten, die wij gebruiken om de prestaties van onze producten en de werkelijkheid te simuleren.

3. Gebruiksevaluatie



Ruim 200 Attends gebruikers in een intramurale omgeving waren gedurende 4 weken betrokken bij een gebruiksevaluatie. De effecten op de huid werden bewaakt door de klinische staf en visueel geëvalueerd en beoordeeld met behulp van een erkend hulpmiddel voor de beoordeling van de huidconditie.

Opmerking: niet alle producten hoeven deze drie tests te ondergaan; sommige producten hebben identieke materialen en kerntechnologie, wat betekent dat één testresultaat voor meerdere producten kan worden gebruikt. Alle materialen worden echter onderworpen aan de Test met droog materiaal.

* Transepidermaal vochtverlies: een hulpmiddel dat meet of de huid vocht heeft verloren, wat een teken is van een vermindering van de gezondheid van de huid.

** De Vochtterugslag test meet de hoeveelheid vloeistof die (onder druk) terugkeert naar het oppervlak van het product, nadat er een scheut vloeistof is toegevoegd aan het product.

Conclusie

De kerntechnologie van Attends incontinentieproducten biedt de gebruiker een uitstekende bescherming tegen lekkage en het behoud van een droge huid. De resultaten van de SGS proderm testen (Test met droog en nat materiaal en Gebruiksevaluatie) tonen aan dat Attends producten huidvriendelijk zijn.

Daarom heeft SGS proderm Attends toestemming verleend voor het gebruik van het kwaliteitszegel op zijn producten*



* Geteste/goedgekeurde producten: Attends For Men, Attends Men, Soft, Lady Night Pad, Lady Discreet Underwear, Men Protective Underwear, Contours, Slip Regular, Slip Active, Slip Classic, Flex, Adjustable, Pull-Ons en Cover-Dri.

We moeten het kwaliteitszegel elke dag weer verdienen...

Elke dag verlaten 25 volle vrachtwagens de fabriek van Attends in Aneby, Zweden, om producten te leveren aan klanten in heel Europa. Om aan onze hoge kwaliteitsnormen te voldoen, handelen we elke productklacht die we ontvangen af. Wij zijn contractueel verplicht alle klachten met betrekking tot de huidgezondheid van onze gebruikers met SGS proderm te delen. Dit schept volledige transparantie tussen Attends en SGS proderm.

Mocht er een toename zijn van huidgezondheidsklachten met betrekking tot een specifieke productcategorie, dan verwacht SGS proderm een grondige follow-up en volledige oplossing van het probleem.

We zijn er trots op te kunnen verklaren dat er sinds het sluiten van het contract tussen Attends en SGS proderm (Juni 2010), geen aanleiding voor corrigerende acties is geweest.

Referenties

SGS proderm GmbH, Kiebitzweg 2, 22869 Schenefeld / Hamburg, Duitsland.
www.sgs-proderm.de

SGS proderm onderzoeksnummers; 09.0363-99, 10.0240-99, 10.0239-06, 11.0427-02, 11.0489-11, 14.0062.02, 15.0022-02, 15.0406-02, 18.0217-02, 18.0346-11, 18.0216-02, 19.0384-02, 20.0348-02, 21.0221-02, 22.0268-02, 22.0269-02, Oktober 2009 - September 2022

Gebruiksevaluatierapporten; Attends Healthcare, Augustus 2010, Februari 2012 en Juni 2014.

Alle documentatie (waaronder rapporten, certificaten, protocollen, testonderzoekresultaten) is op aanvraag verkrijgbaar. Datum laatste herziening: Januari 2023.